

## 注意事項：

・本マニュアルに従って作業しても専用アプリケーション(以後、viewphii 64 アプリケーション)のインストールが完了しない場合、販売店までご連絡ください。

・ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。

取扱説明書は、viewphii 64 アプリケーション内で参照できます。

また <https://viewphii.com/download64/> からダウンロードすることができます。

・必須要件に適合した PC をご使用ください。(※1)

・viewphii 64 アプリケーションの起動中は、無線のネットワーク設定は viewphii 64 に最適化しているため、その他の無線ネットワークに接続することはできません。

詳細は、取扱説明書の「プローブとアプリケーションの接続」を参照してください。

・Windows のユーザーアカウントは、下記の設定を満たしている必要があります。

アカウントの種類：管理者

アカウント名：使用禁止文字 & ' ( ) ^ ` および半角記号 2 文字連続は禁止

## (※1) PC の必須要件：


OS	： Windows 10 64bit / Windows 11
CPU	： Core i5 (Intel 第 10 世代以降) 以上
メモリ	： 8GB 以上
ストレージ	： 128GB 以上
通信機能	： IEEE802.11a/b/g/n
エミッション規格	： CISPR32 適合相当
安全性	： IEC62368-1 適合相当

推奨機種については <https://viewphii.com/download64/> を参照してください。


## ■PC 設定

viewphii 64 アプリケーションとプローブを無線接続(Wi-Fi)するため、PC の Wi-Fi 設定を ON にします。

また、Wi-Fi 2.4GHz 帯を使用する場合、Bluetooth は OFF にすることを推奨します。


1. Windows メニューから設定  をクリックします。

2. ネットワークとインターネットをクリックします。

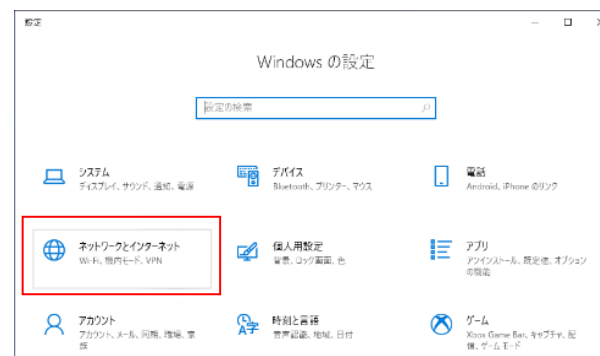

3. 機内モードで Wi-Fi をオン、Bluetooth をオフにします。

追加で無線 LAN アダプタをご使用の場合は、Wi-Fi 2 もオンにしてください。

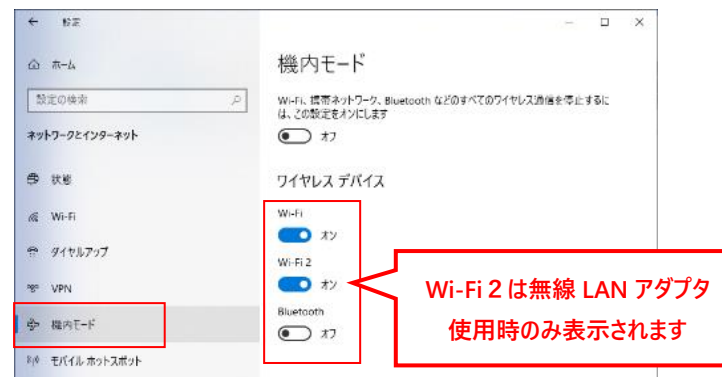

## ■インストール方法


1. 下記のサイトから viewphii 64 アプリケーションの.zip ファイルをダウンロードします。

<https://viewphii.com/download64/>


※.zip ファイルサイズは 100Mbyte 以上あります。



2. ダウンロードした.zip ファイルを右クリックして、「すべて展開」で任意の場所に展開します。

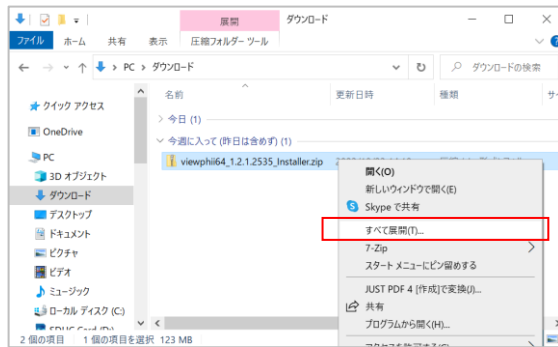


3. 展開したフォルダ内の.exe ファイルをダブルクリックします。  
(PC の設定により.exe が表示されない場合があります。)

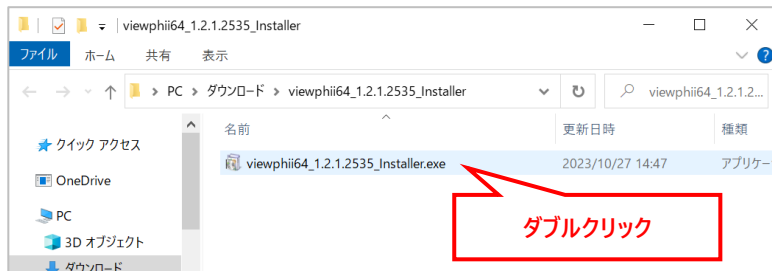


4. 以下のダイアログが表示された場合は「実行」を選択、または、「詳細情報」を選択後に「実行」を選択します。



下記の画面が表示されます。

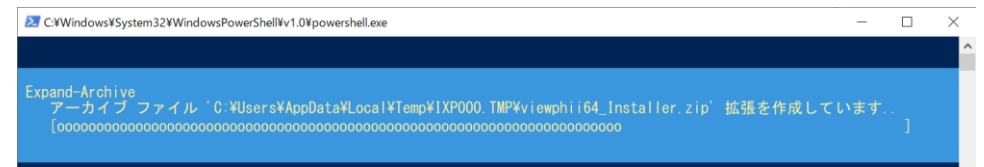


5. ユーザーアカウント制御(Windows コマンドプロセッサ)が表示された場合は、「はい」を押下します。

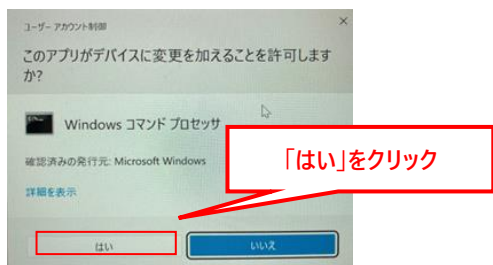


※誤って「いいえ」を選択した場合、手順 3 からやり直してください。


6. インストールが開始されます。

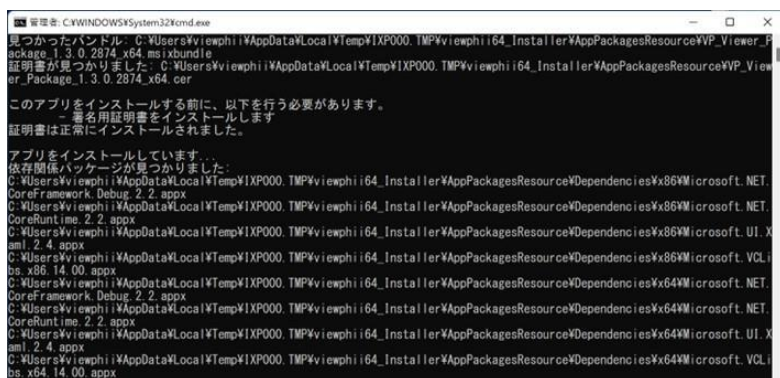

7. 以下が表示された場合は、「ライセンス条項および使用条件に同意する(A)」にチェックをして、「インストール」ボタンを押下します。

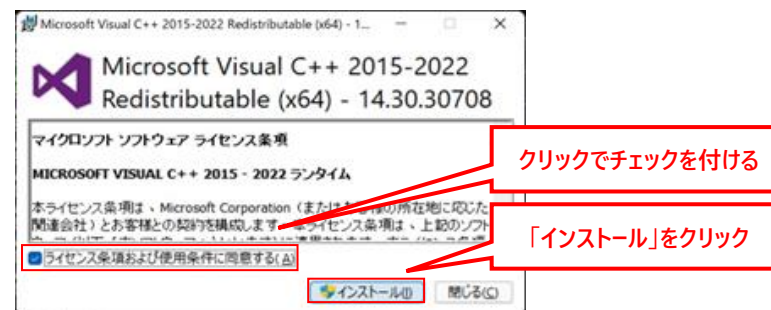


下記画面が表示されたら「閉じる」を押下します。

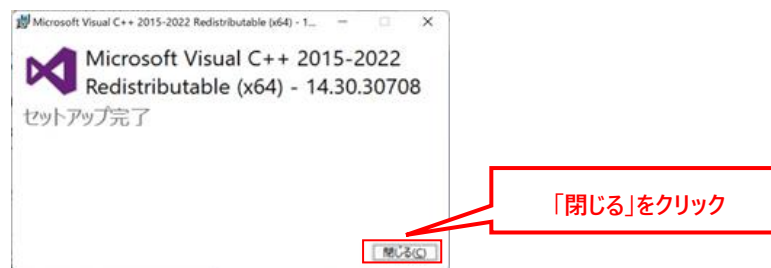

※再起動が求められた場合は、再起動して下さい。


8. 「成功：アプリは正常にインストールされました」と表示されたら、Enter キーを押下します。

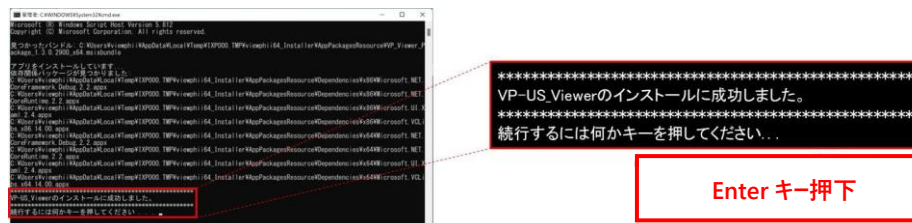

9. 下記画面が表示された場合は、Enter キーを押下します。




10. デスクトップ上に下記のショートカットが生成されています。  
このショートカットから viewphii 64 アプリケーションを起動できます。

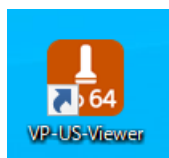


viewphii 64 アプリケーションのインストールは以上です。  
続いてアプリケーションを起動し、「プローブの登録」を実施してください。

## ■アプリケーションの起動

1. ショートカットをダブルクリックしてアプリケーションを起動します。

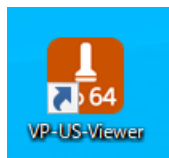

2. 下記画面が表示されたら「はい」を押下します。  
これにより無線のネットワーク設定が viewphii64 に最適化され、アプリケーションを立ち上げるまでの間、その他の無線ネットワークに接続できなくなります。

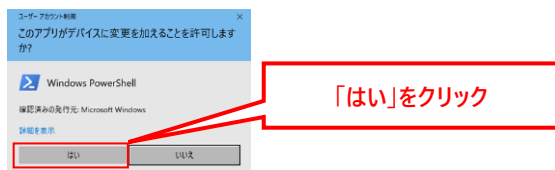


## ■プローブの登録


初めて viewphii 64 アプリケーションを起動した場合、viewphii 64 アプリケーションにプローブを登録（ライセンス有効化）する画面が表示されます。

以下の手順に従って、プローブを登録（ライセンス有効化）してください。

1. 登録するプローブの電源ボタンを長押しして、電源を ON にします。  
しばらくすると、プローブ一覧に該当のプローブが表示されます。

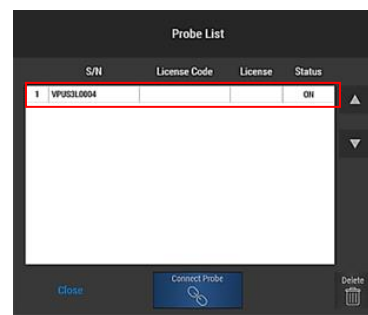

2. 「License Code」欄をクリックして、ライセンスコードを入力してください。

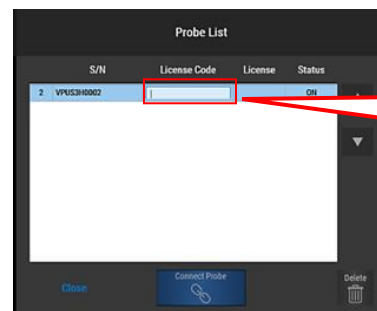

ライセンスコードは、販売店にお問い合わせください。

License Code 欄をクリックし  
ライセンスコードを入力

3. 「License」欄に Success と表示されれば登録（ライセンス有効化）完了です。  
「Close」を押下してください。

