

注意事項：

- 本マニュアルに従って作業しても専用アプリケーション(以後、viewphii 64 アプリケーション)のインストールが完了しない場合、販売店までご連絡ください。
- インストール済みの viewphii 64 アプリケーションより古いバージョンをインストールする時は、一旦アンインストール後に本手順に従ってインストールしてください。 アンインストール前に必要なデータはエクスポートしてください。
- ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
取扱説明書は、viewphii 64 アプリケーション内で参照できます。
また <https://viewphii.com/download64/> からダウンロードすることができます。
- 必須要件に適合した PC をご使用ください。(※1)
- viewphii 64 アプリケーションの起動中は、無線のネットワークは viewphii 64 で使用しているためその他の無線ネットワークに接続することはできません。
詳細は、取扱説明書の「プローブとアプリケーションの接続」を参照してください。
- Windows のユーザーアカウントは、下記の設定を満たしている必要があります。
アカウントの種類：管理者(インストール or アプリ実行)、標準ユーザー(アプリ実行)
アカウント名：使用禁止文字 ! & ' () ^ ` および半角記号 2 文字連続は禁止
※標準ユーザーでアプリ実行する場合は、一時的に該当アカウントを管理者に変更し、アプリインストール後に標準ユーザーに戻してください。
アカウントの種類の変更をした後は必ず PC を再起動してください。
※禁止文字が含まれている場合、viewphii 64 アプリケーションが正常に動作しません。


(※1) PC の必須要件：

OS	: Windows 10 64bit / Windows 11 64bit
CPU	: Core i5 (Intel 第 10 世代以降) 以上
メモリ	: 8GB 以上
ストレージ	: 128GB 以上
通信機能	: IEEE802.11a/b/g/n
エミッション規格	: CISPR32 適合相当
安全性	: IEC62368-1 適合相当

推奨機種については <https://viewphii.com/download64/> を参照してください。

■PC 設定

viewphii 64 アプリケーションとプローブを無線接続(Wi-Fi)するため、PC の Wi-Fi 設定を ON にします。
また、Wi-Fi 2.4GHz 帯を使用する場合、Bluetooth は OFF にすることを推奨します。


- Windows メニューから設定  をクリックします。
- ネットワークとインターネットをクリックします。



- 機内モードのメニューで Wi-Fi をオン、Bluetooth をオフにします。

追加で無線 LAN アダプタをご使用の場合は、Wi-Fi 2 もオンにしてください。

IP アドレスは自動取得(DHCP)としてください。(※Windows 初期設定から変更不要)

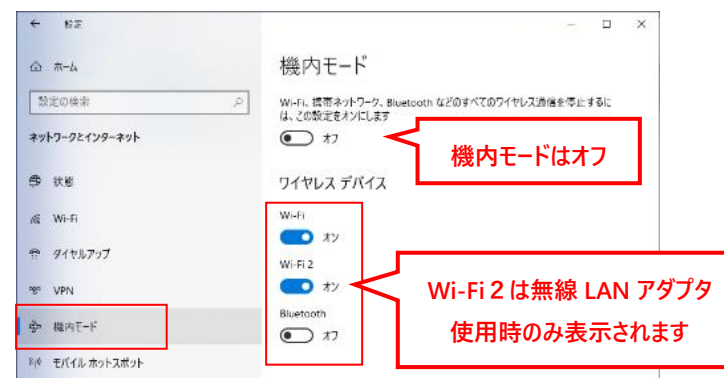

■インストール方法 【管理者アカウント ※注意事項参照】

1. 下記のサイトから viewphii 64 アプリケーションの.zip ファイルをダウンロードします。


ダウンロードにはプローブのシリアル番号が必要です。

<https://viewphii.com/download64/>


※.zip ファイルサイズは 100Mbyte 以上あります。



2. ダウンロードした.zip ファイルを右クリックして、「すべて展開」で任意の場所に展開します。

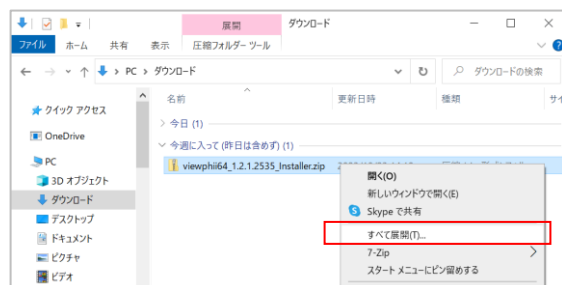

3. 展開したフォルダ内の.exe ファイルをダブルクリックします。
(PC の設定により.exe が表示されない場合があります。)


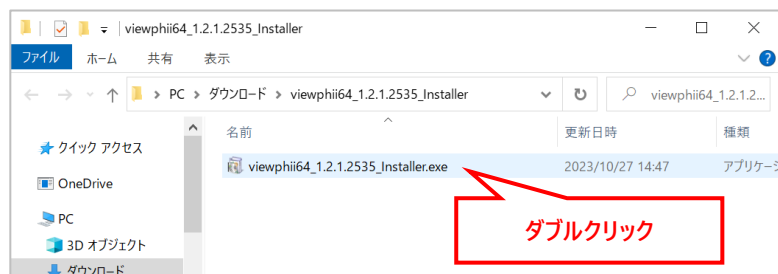


4. 以下のダイアログが表示された場合は「実行」を選択、または、「詳細情報」を選択後に「実行」を選択します。

◆インターネット未接続状態の場合




◆インターネット接続状態の場合

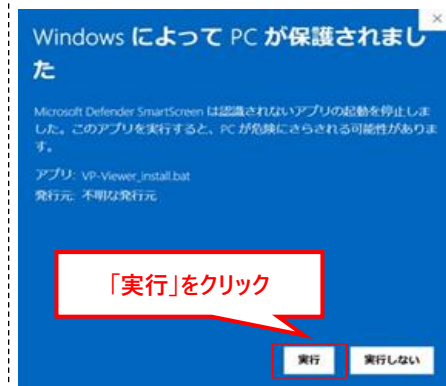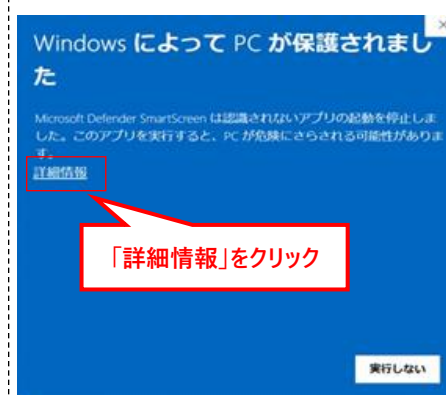


標準ユーザーアカウントでインストールを実行した場合、以下の画面が表示されます。

アカウントの種類を管理者に変更し、手順 3 からやり直してください。

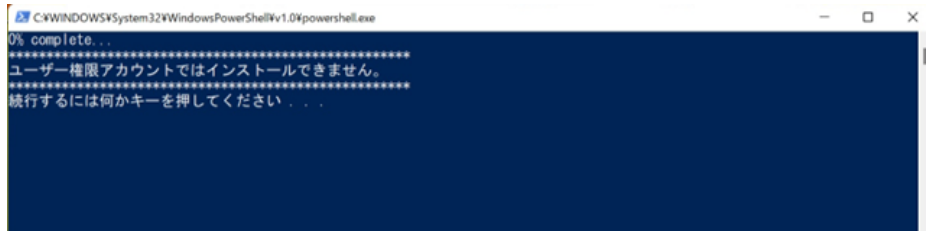

5. ユーザーアカウント制御(Windows コマンドプロセッサ)が表示された場合は、「はい」を押下します。

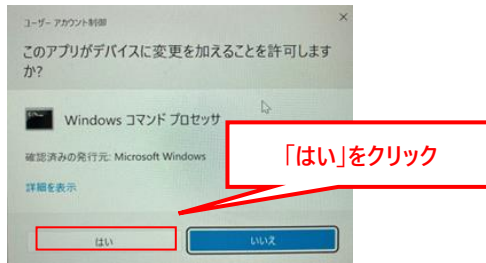


※誤って「いいえ」を選択した場合、手順 3 からやり直してください。


6. インストールが開始されます。



7. 以下が表示された場合は、「ライセンス条項および使用条件に同意する(A)」にチェックをして、「インストール」ボタンを押下します。

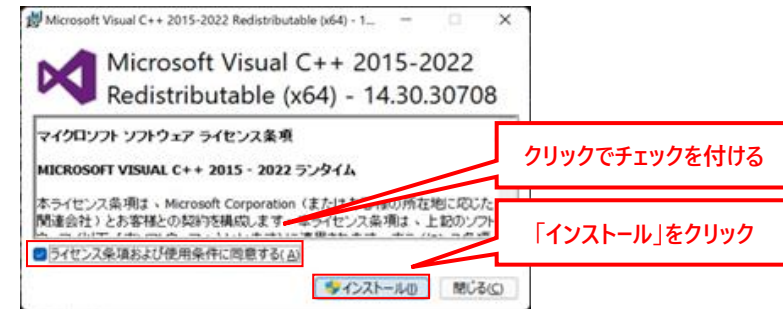


下記画面が表示されたら「閉じる」を押下します。

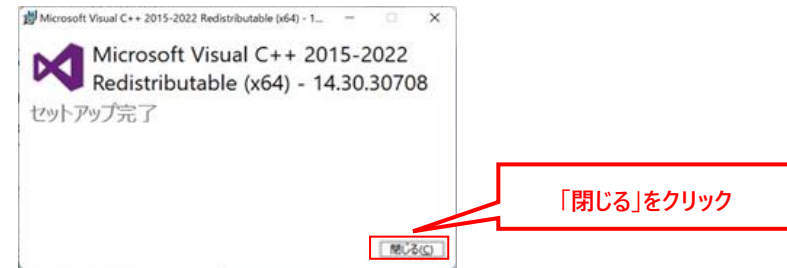

※再起動が求められた場合は、再起動して下さい。

8. 「成功：アプリは正常にインストールされました」と表示されたら、Enter キーを押下します。

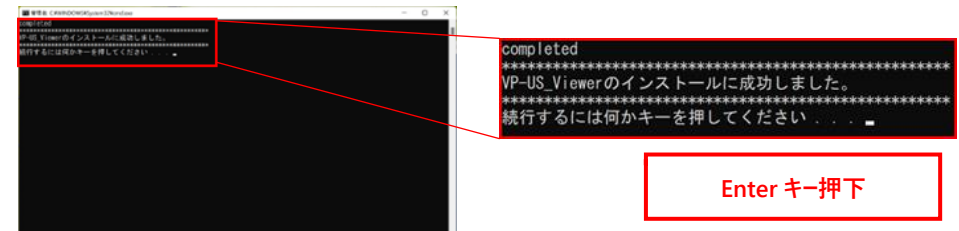


9. 下記画面が表示された場合は、Enter キーを押下します。



10. デスクトップ上に下記のショートカットが生成されています。


このショートカットから viewphii 64 アプリケーションを起動できます。

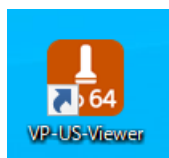

viewphii 64 アプリケーションのインストールは以上です。
続いて viewphii 64 アプリケーションを起動し、「プローブの登録」を実施してください。

■viewphii 64 アプリケーションの起動

ショートカットをダブルクリックして viewphii 64 アプリケーションを起動します。

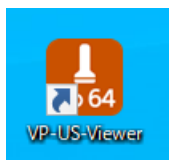


■プローブの登録

初めて viewphii 64 アプリケーションを起動した場合、viewphii 64 アプリケーションにプローブを登録（ライセンス有効化）する画面が表示されます。


以下の手順に従って、プローブを登録（ライセンス有効化）してください。

1. 登録するプローブの電源ボタンを長押しして、電源を ON にします。

しばらくすると、プローブ一覧に該当のプローブが表示されます。

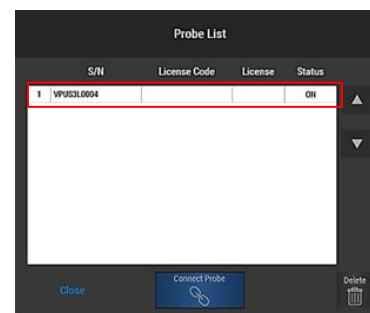

2. 「License Code」欄をクリックして、ライセンスコードを入力してください。

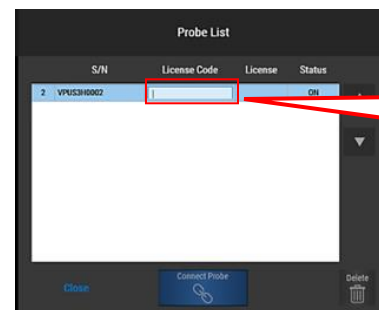

ライセンスコードは、販売店にお問い合わせください。

License Code 欄をクリックし
ライセンスコードを入力

3. 「License」欄に Success と表示されれば登録（ライセンス有効化）完了です。

「Close」を押下してください。

